


— INSTRUKCJA OBSŁUGI

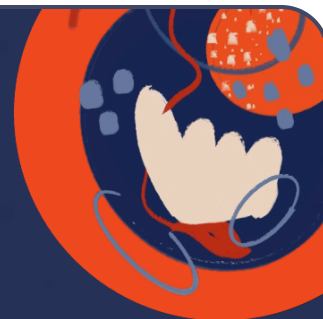

EllaThera.

Chłód i kojące ciepło.

Dla Twojej skóry.



URZĄDZENIE DO PIELĘGNACJI
TWARZY
CIEPŁO · CHŁÓD

PRZECZYTAJ PRZED
PIERWSZYM
UŻYCIEM

W pudełku.

Sprawdź, czy zestaw jest kompletny.



Urządzenie EllaThera

Chłód -10°C i ciepło do 55°C w jednym.



Przewód USB-C

Ładowanie w ~ 3 h, bez osobnej ładowarki.



Etui podróżne

Bezpiecznie podróżuje z Tobą.



Instrukcja i karta gwarancji

12 miesięcy gwarancji, serwis w Polsce.

Poznaj swoje urządzenie.



- 1** **Płytko grzejno-chłodząca**
głowica, którą przykładasz
- 2** **Przycisk zasilania / trybu**
- 3** **Wskaźnik LED**
kolor pokazuje tryb
- 4** **Port USB-C**
w dolnej części
- 5** **Korpus**
matowe, antypoślizgowe
wykończenie

Trzymaj urządzenie pewnie, obejmując korpus dłonią —
płytko powinna płasko przylegać do skóry.

Obsługa jednym przyciskiem.

Całe urządzenie obsłużysz jednym przyciskiem.

- 1 Włącz / wyłącz**
Przytrzymaj przycisk 2 s. Po włączeniu urządzenie startuje w trybie chłodzenia.
- 2 Przełącz chłód / ciepło**
Przytrzymaj przycisk 3 s. Z ciepła na chłód trzymaj, aż dioda zaświeci na niebiesko.
- 3 Zmień poziom ciepła**
W trybie ciepła przytrzymaj 2 s: 1 → 2 → 3 (38 / 45 / 55 °C).

Przesuwaj płytkę powoli po skórze 3–5 min — nie trzymaj jej w jednym miejscu.

Dobrze wiedzieć: Wentylator pracuje ~5 min po wyłączeniu (chłodzi wnętrze). Sygnał dźwiękowy ostrzega przed auto-wyłączeniem — 10 min w trybie chłodu, 20 min w trybie ciepła.

Kiedy chłód, kiedy ciepło.

● Chłód -10°C

RANO

Ścina opuchliznę, wygładza owal twarzy, koi zaczerwienienia i zwęża pory. Nie stosuj dłużej niż 15–20 min na jeden obszar; dla pełnego chłodu odczekaj ~1 h przed kolejną sesją.

● Ciepło do 55°C

WIECZOREM

Rozluźnia, otula i pomaga serum wnikać głębiej. Najlepiej z bogatszymi formułami. Uważaj na oparzenia powyżej 50 °C i nie stosuj ciepła na świeżych stanach zapalnych.

Kolejność kosmetyków się nie zmienia — od najlżejszych do najbogatszych. EllaThera dokłada tylko jedno: temperaturę.

Co mówi dioda.

Kolor i zachowanie diody pokazują tryb, poziom i stan baterii. Po włączeniu — tryb chłodzenia (niebieski).

 **Niebieski**
Tryb chłodzenia (-10°C).

 **Pomarańczowy**
Tryb ciepła.

 **Poziom 1 → 2 → 3**
Intensywność ciepła: 38 / 45 / 55 $^{\circ}\text{C}$.

Stan baterii
 poniżej 30% · 30–79% · 80–90% · w pełni naładowana.

 **Pulsowanie**
Ładowanie lub niski poziom baterii.

Ładowanie przez USB-C.

- Podłącz dołączony przewód USB-C do portu w dolnej części urządzenia.
- Pełne naładowanie trwa około 3 godzin.
- Dioda sygnalizuje stan ładowania.

! Urządzenie nie działa podczas ładowania. Nie obsługuj go mokrymi rękami.

Bateria	litowo-jonowa
Zasilanie	USB-C · DC 5V · 2A

Zanim zaczniesz.

Nie używaj urządzenia, jeśli:

- △ masz rozrusznik serca lub inny wszczepiony implant elektroniczny,
- △ jesteś w ciąży lub karmisz piersią,
- △ na świeżych ranach, bliznach pooperacyjnych i stanach zapalnych,
- △ przy chorobach skóry, alergiach lub silnym podrażnieniu.

EllaThera to urządzenie wellness, nie wyrób medyczny. W razie wątpliwości skonsultuj się ze specjalistą. Jeśli pojawi się ból lub nietypowe objawy — przerwij używanie.

Czyszczenie i przechowywanie.

- Po użyciu przetrzyj płytkę miękką, lekko wilgotną ściereczką.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie i nie używaj substancji łatwopalnych.
- Przed schowaniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i suche.
- Przechowuj w etui, w suchym miejscu, z dala od dzieci i wilgoci.

Dane techniczne.

Model	ELATA2024
-------	-----------

Chłodzenie	−10 °C
------------	--------

Ciepło	38 / 45 / 55 °C
--------	-----------------

Wymiary	65 × 198 × 66 mm
---------	------------------

Waga	380 g
------	-------

Zasilanie	DC 5V · 2A (USB-C)
-----------	--------------------

Ładowanie	~3 h
-----------	------

Bateria	litowo-jonowa
---------	---------------

Certyfikaty	KC · CE · FCC · RCM
-------------	---------------------

Producent	ICE LINKER · Korea
-----------	--------------------

Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu poprawy jakości.

Gwarancja i zwroty.



12 miesięcy gwarancji

Pełna gwarancja producenta. Naprawiamy lub wymieniamy.



14 dni na zwrot

Bez podawania przyczyny, dla nieużywanego produktu.



Serwis w Polsce

Wsparcie na miejscu, bez wysyłki do Korei.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wskutek upadku, niewłaściwego użycia ani modyfikacji.

Zgodność i utylizacja.

CE

KC

FCC

RCM

WEEE

Baterii litowej nie wyrzucaj z odpadami domowymi — oddaj do punktu zbiórki. Nie wrzucaj do ognia i nie przegrzewaj.

Symbol przekreślonego kosza oznacza obowiązek selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego.

Producent: ICE LINKER Co., Ltd., Gwangju, Korea · model EllaThera (ELATA2024). Wyprodukowano w Korei.

Dystrybutor PL: MODESTIC Krystyna Zaitseva · ul. Głębocka 5/U10, 03-287 Warszawa · NIP 8133873866 · info@modestic.pl · +48 733 640 892.

© 2026 EllaThera